

HEADALOFT™

Guide d'installation et d'entretien

HEADALOFT™ est une solution innovante brevetée qui s'adresse aux adultes et aux enfants contraints de se déplacer en fauteuil roulant. **HEADALOFT™** maintient confortablement et délicatement la tête parfaitement droite d'une manière polyvalente et non restrictive.

- **HEADALOFT™** possède un appui occipital en qui peut être ajouté afin de fournir un appui supplémentaire pour le cou et la tête.



Compatible avec tous les fauteuils roulants équipés d'un appui-tête et de sièges auto spéciaux, **HEADALOFT™** est l'ultime accessoire pour appui-tête. Il est facile à installer, peut être transféré rapidement entre le fauteuil roulant et le siège auto ou tout autre type de siège doté d'un appui-tête auquel **HEADALOFT™** peut être fixé.



Caractéristiques techniques

- Fabriqué dans un tissu durable de haute qualité.
- Le rembourrage de **HEADALOFT™** est ignifuge.
- Comprend trois sangles de fixation pour la tête de différentes tailles pour pouvoir l'adapter aux dimensions de la tête.
- Se fixe sur tous les fauteuils roulants équipés d'un appui-tête conventionnel.
- Compatible avec la plupart des sièges auto.
- Conforme aux normes de sécurité anti-choc américaines US - FMVSS 213, NPRM 213.
- Appui-tête pivotant à 360°.
- Conforme à la norme OKEOTEX 100 ainsi qu'avec d'autres normes internationales et homologué par la FDA.




Headovations garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de 12 mois, à compter de la date achat, sous réserve de la politique de Headovations et que le produit porte une étiquette d'identification d'origine. La garantie susmentionnée est soumise à la condition que l'acheteur prouve que le produit a été correctement manipulé et stocké, conformément aux instructions de Headovations. Si Headovations constate que le produit est défectueux, Headovations remplacera le produit endommagé.



Instructions pour l'installation :

Pour installer **HEADALOFT™** sur un fauteuil roulant, rien de plus simple. Suivez pas à pas ces instructions simples pour installer **HEADALOFT™**.

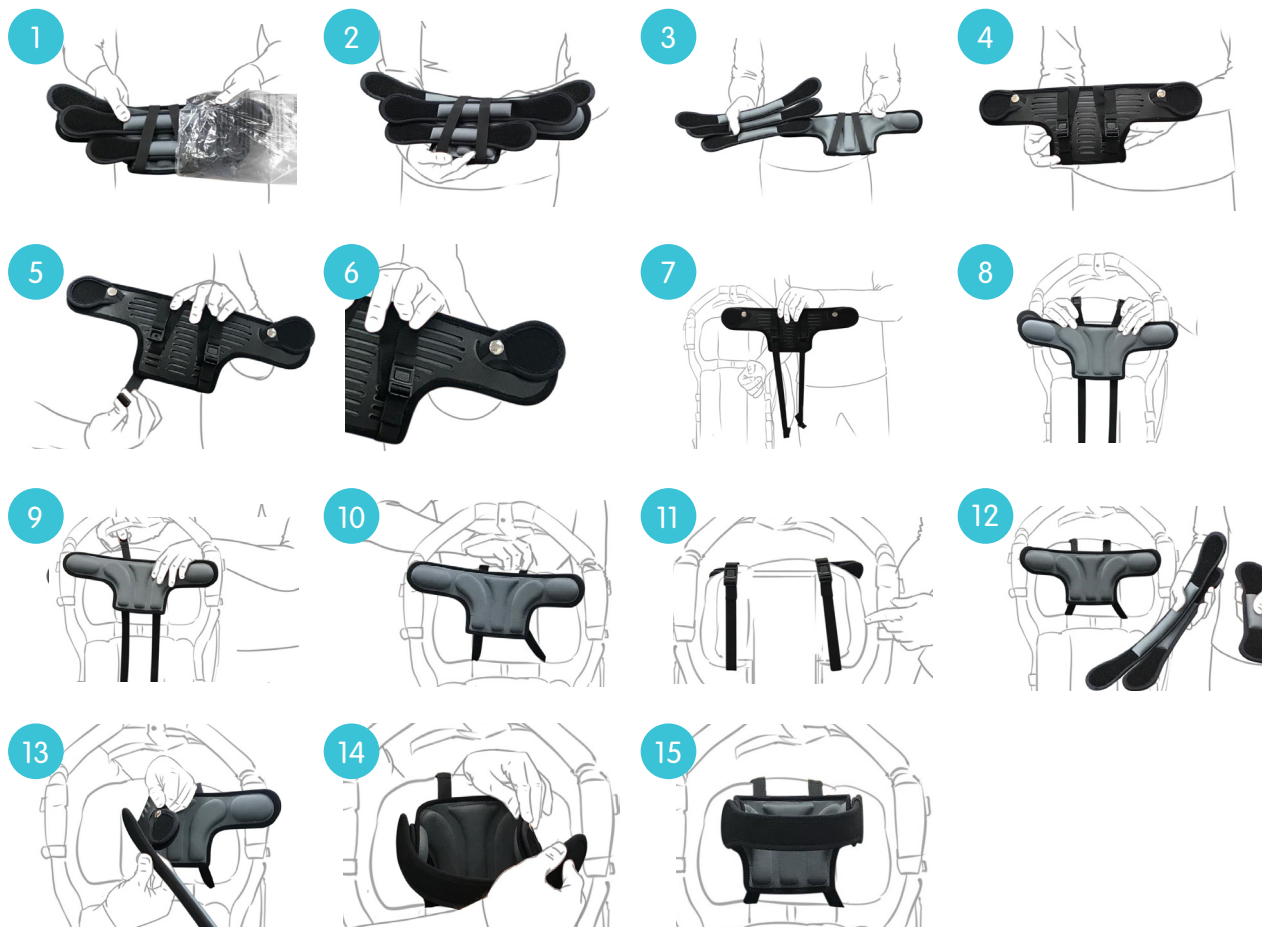

Entretien:

HEADALOFT™ ne nécessite aucun entretien. Il est extrêmement durable et doit seulement être lavé de façon occasionnelle. Il peut être lavé en machine jusqu'à 30 °C / 86 °F, mais ne pas utiliser d'eau de Javel afin de ne pas en dégrader l'aspect et le matériau.

Une fois lavé, ne pas repasser **HEADALOFT™** ni le mettre dans un sèche-linge. Le laisser sécher à l'air libre. Il ne doit pas être nettoyé à sec.

Rangement :

Lorsqu'il n'est pas utilisé, **HEADALOFT™** doit être rangé dans un endroit sec et propre.

La société **Headovations** a été fondée en 2014 par Ben Cohen Gazit. Elle est spécialisée dans la conception de systèmes d'appui-tête innovants.

HEADALOFT™ s'est avéré particulièrement efficace pour les enfants et les adultes atteints de troubles de la motricité, de troubles neuromusculaires, de troubles neurologiques (par ex. infirmité motrice cérébrale) et de blessures.

Developed by:



In Partnership with:

